



Model MB130
Baby Scale
User Manual

Modelo MB130
Báscula para bebés
Manual del usuario

Modèle MB130
Pèse-bébé
Manuel d'utilisation



CARDINAL SCALE MFG. CO.
203 E. Daugherty, Webb City, MO 64870 USA
8535-M231-O1 Rev A Ph: 417-673-4631 • Fax: 417-673-2153
07/13 www.detecto.com

Technical Support: Ph: 866-254-8261 • tech@cardet.com

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION	1
SPECIFICATIONS	1
KEY FUNCTIONS	2
DISPLAY ANNUNCIATORS	2
SCALE ASSEMBLY	3
INSTALLING/REPLACING THE BATTERY	5
AC POWER ADAPTOR	6
ERROR MESSAGES	7

FCC COMPLIANCE STATEMENT

This equipment generates uses and can radiate radio frequency and if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause interference to radio communications. It has been tested and found to comply with the limits for a Class A computing device pursuant to Subpart J of Part 15 of FCC rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference when operated in a commercial environment. Operation of this equipment in a residential area may cause interference in which case the user will be responsible to take whatever measures necessary to correct the interference.

You may find the booklet "How to Identify and Resolve Radio TV Interference Problems" prepared by the Federal Communications Commission helpful. It is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Request stock No. 001-000-00315-4.

PROPER DISPOSAL

When this device reaches the end of its useful life, it must be properly disposed of. It must not be disposed of as unsorted municipal waste. Within the European Union, this device should be returned to the distributor from where it was purchased for proper disposal. This is in accordance with EU Directive 2002/96/EC. Within North America, the device should be disposed of in accordance with the local laws regarding the disposal of waste electrical and electronic equipment.

It is everyone's responsibility to help maintain the environment and to reduce the effects of hazardous substances contained in electrical and electronic equipment on human health. Please do your part by making certain that this device is properly disposed of. The symbol shown to the right indicates that this device must not be disposed of in unsorted municipal waste programs.



COPYRIGHT

All rights reserved. Reproduction or use, without expressed written permission, of editorial or pictorial content, in any manner, is prohibited. No patent liability is assumed with respect to the use of the information contained herein.

DISCLAIMER

While every precaution has been taken in the preparation of this manual, the Seller assumes no responsibility for errors or omissions. Neither is any liability assumed for damages resulting from use of the information contained herein. All instructions and diagrams have been checked for accuracy and ease of application; however, success and safety in working with tools depend to a great extent upon the individual accuracy, skill and caution. For this reason the Seller is not able to guarantee the result of any procedure contained herein. Nor can they assume responsibility for any damage to property or injury to persons occasioned from the procedures. Persons engaging the procedures do so entirely at their own risk.

Serial Number _____
Date of Purchase _____
Purchased From _____

RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE USE

INTRODUCTION


The Model MB130 Baby Scale is a 44lb (20kg) capacity battery-operated baby scale. The scale is equipped with a removable baby tray to allow weighing small children. With a 9-volt battery (not included) the scale can be used as a portable scale or with the included 12VDC AC Power Adapter the scale can be used in a fixed location.

This manual contains information on the operation of this scale. Please read it before attempting to use the scale and keep it handy for future reference.

SPECIFICATIONS

Capacity:	22/44 lb (10/20 kg.)
Division:	0 to 22lb x 0.01lb (0 to 10kg x 5g) 22 to 44lb x 0.02lb (10 to 20kg x 10g)
Tray:	Removable to allow scale to weigh babies or small children
Weight Units:	lb/kg
Function Keys:	ON/ZERO/OFF, UNIT, and HOLD
Stabilization Time:	1 to 2 Seconds
Operating Temperature:	41° to 95°F (5° to 35°C)
Display:	1.0" (25 mm) LCD display with 5 active digits
Power Requirements:	9-volt battery (not included) or 12VDC AC Power Adapter (included)
Power Saving Feature:	Auto Shut-off after 2 minutes
Dimensions:	
Tray:	22" L x 11 1/4" W x 3 3/4" H (560 x 286 x 96 mm)
Scale:	12 5/8" L x 12 1/4" W x 1 5/16" H / (320 x 310 x 33 mm)

KEY FUNCTIONS

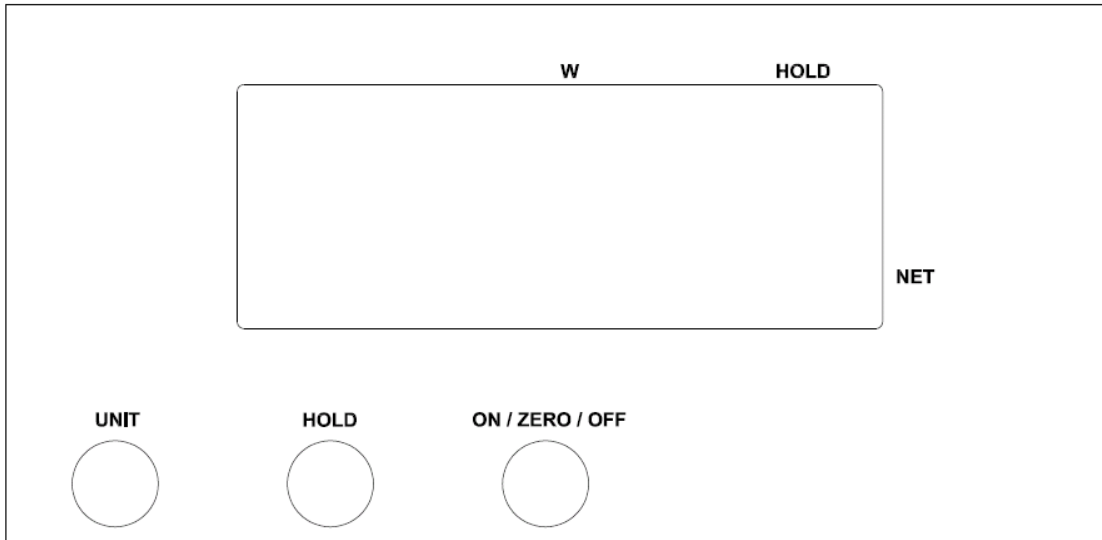

KEYS

ON/ZERO/OFF

1. Press this key to turn the scale ON.
2. Press this key to zero the scale before starting the weighing operation or to zero off the weight of an item (i.e. blanket, pad or toy) on the scale ($\pm 2\%$ of full capacity).
3. Press this key and hold for 3 seconds to turn the scale OFF.

HOLD

1. Press this key to hold the weight value while weighing.
2. Press this key again to disable the weight hold function.

UNIT

1. Press this key to change the weighing units from lb to kg or kg to lb.

DISPLAY ANNUNCIATORS

W The **W** annunciator is located in the top center of the display. An arrow will be turned on to indicate the weight is at zero and the scale is ready to use.

HOLD The **HOLD** annunciator is located at the top right of the display. An arrow will be turned on and **HOLD** be shown on the display for a few seconds to indicate that the weight from the last weighing operation is being held and the baby or child can be removed from the scale. This feature is useful if the baby or child is very active.


NET The **NET** annunciator is located in the right corner of the display. An arrow will be turned on to show that the weight displayed is net weight. Net weight is determined by zeroing the weight of an item from the scale such as blankets, pads or toys. This insures that only the baby's or child's weight is displayed.

kg The **kg** annunciator is turned on to indicate the weight shown is in kilograms.


lb The **lb** annunciator is turned on to indicate the weight shown is in pounds.

SCALE ASSEMBLY

1. Install tray from the rear of scale, sliding it to the front of scale (toward the display). Note that arrow on tray should point to front of scale.

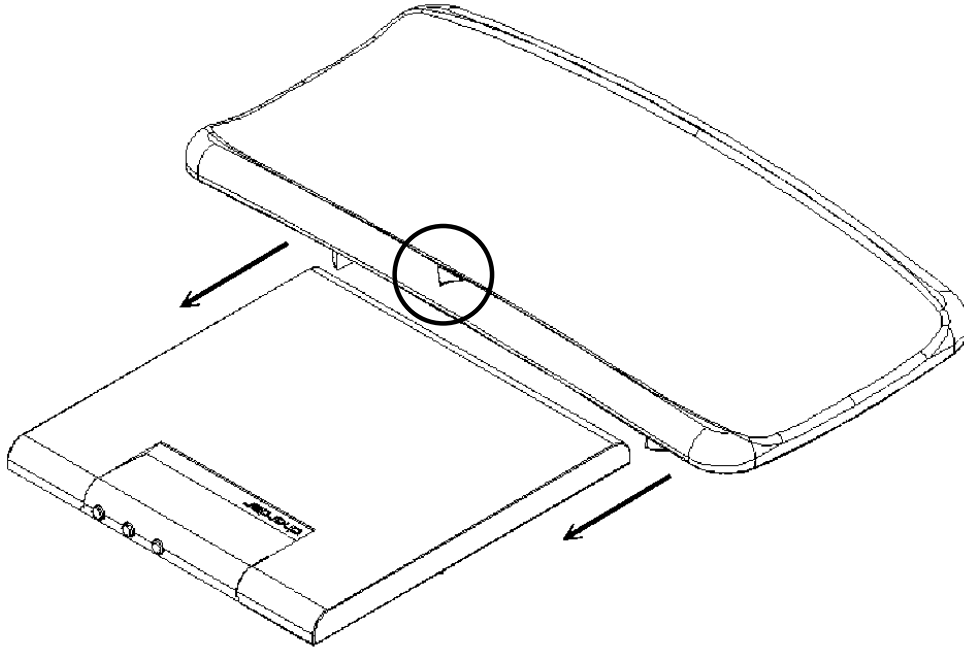


2. Turn scale upside down to screw tray and platform together properly.

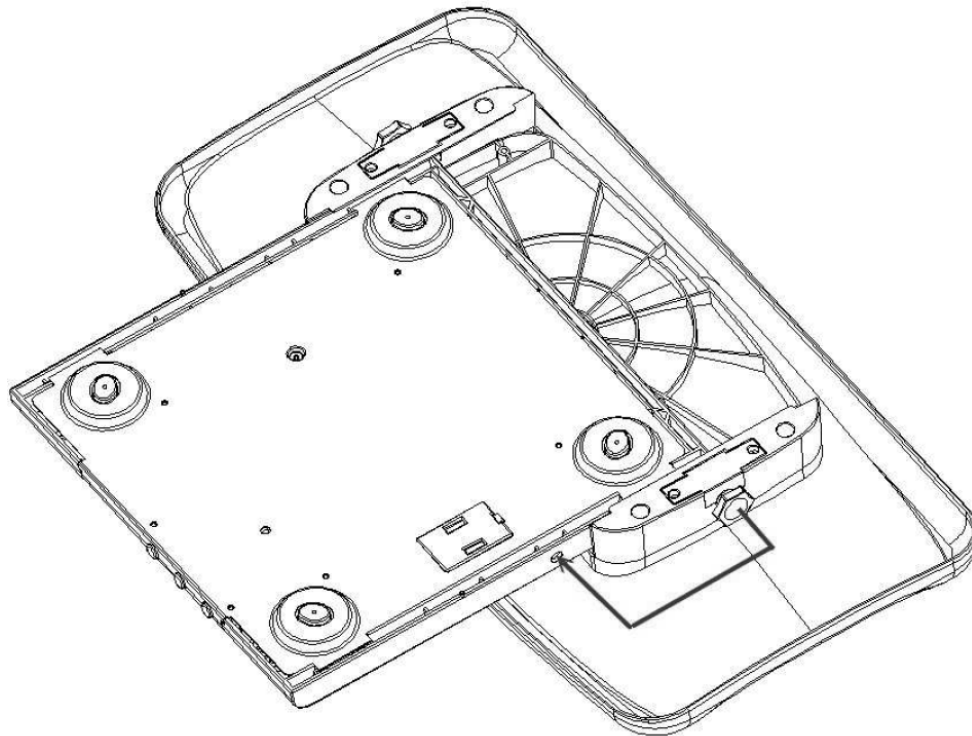


SCALE ASSEMBLY, CONT.

3. Hand-tighten the screws to secure the tray to the platform

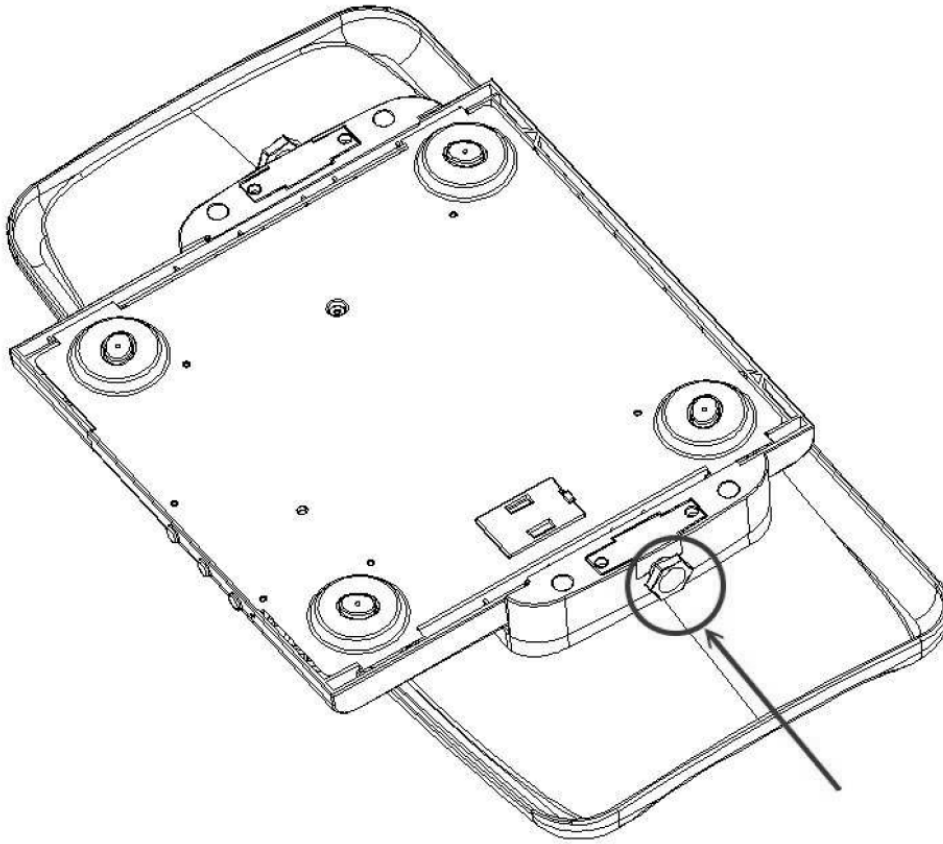

4. Scale assembly is finished. Turn scale over to begin weighing operations.

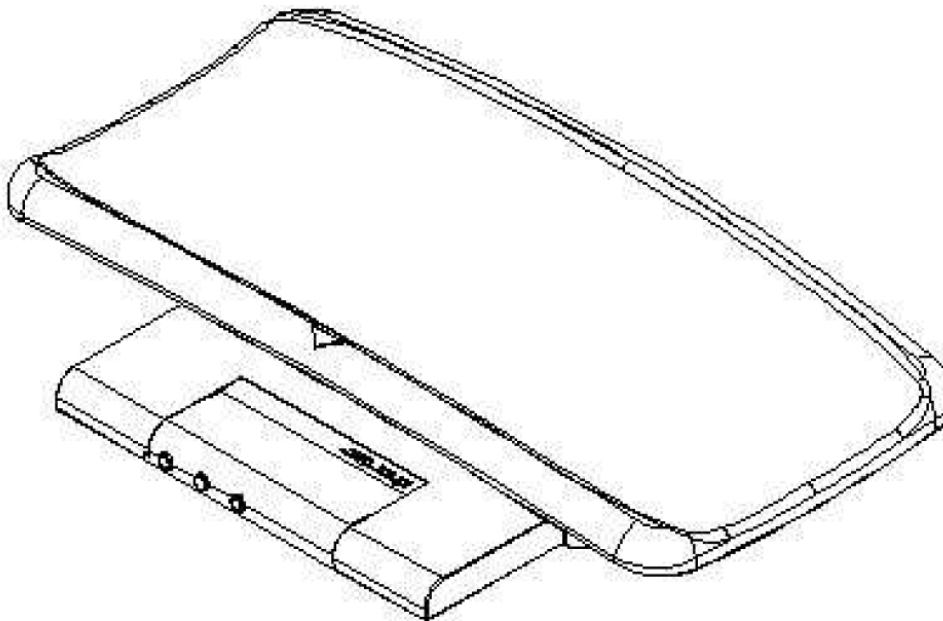


INSTALLING/REPLACING THE BATTERY

1. Turn scale upside down to locate battery housing.



2. Remove battery housing from scale.

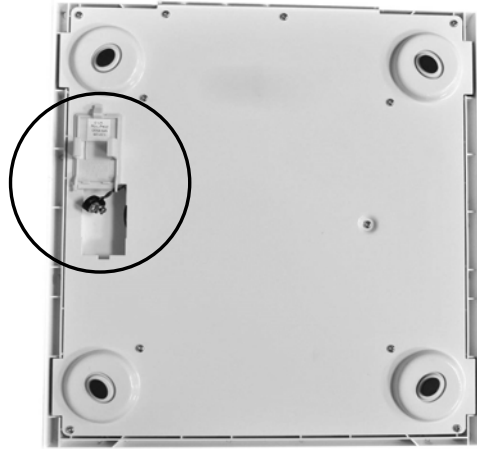

3. The scale uses a 9VDC battery.



4. Install the 9VDC battery.




5. Replace battery housing in scale to complete procedure.




AC POWER ADAPTOR

1. Locate AC Power adaptor jack at rear of scale.

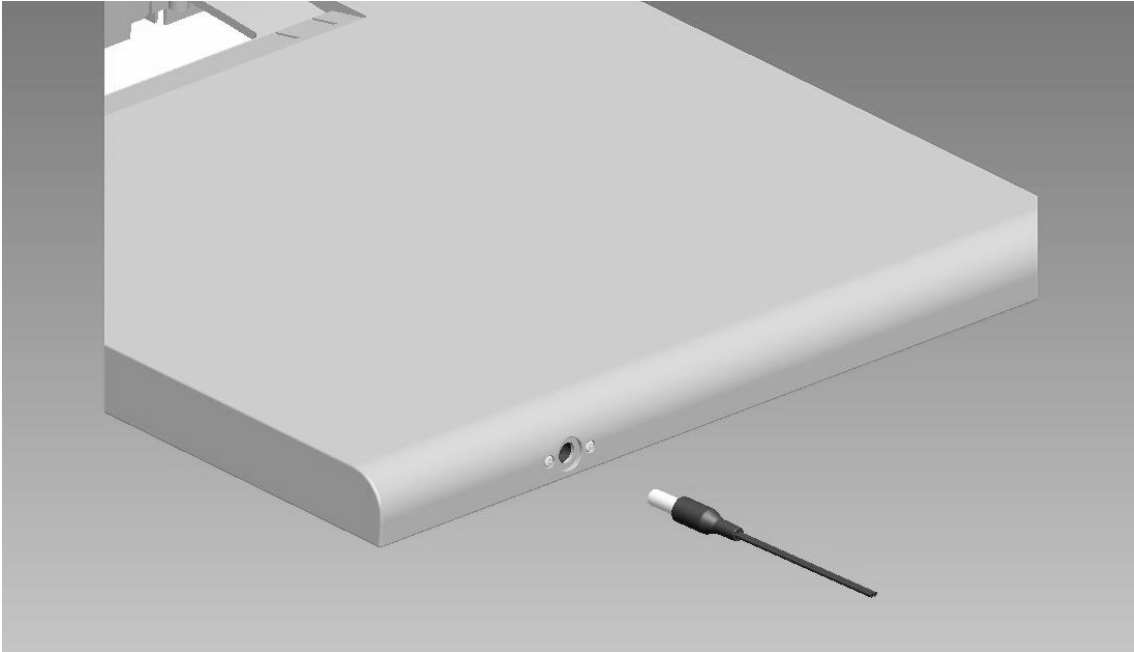


2. Install AC Power Adaptor into jack on rear of scale as shown below.

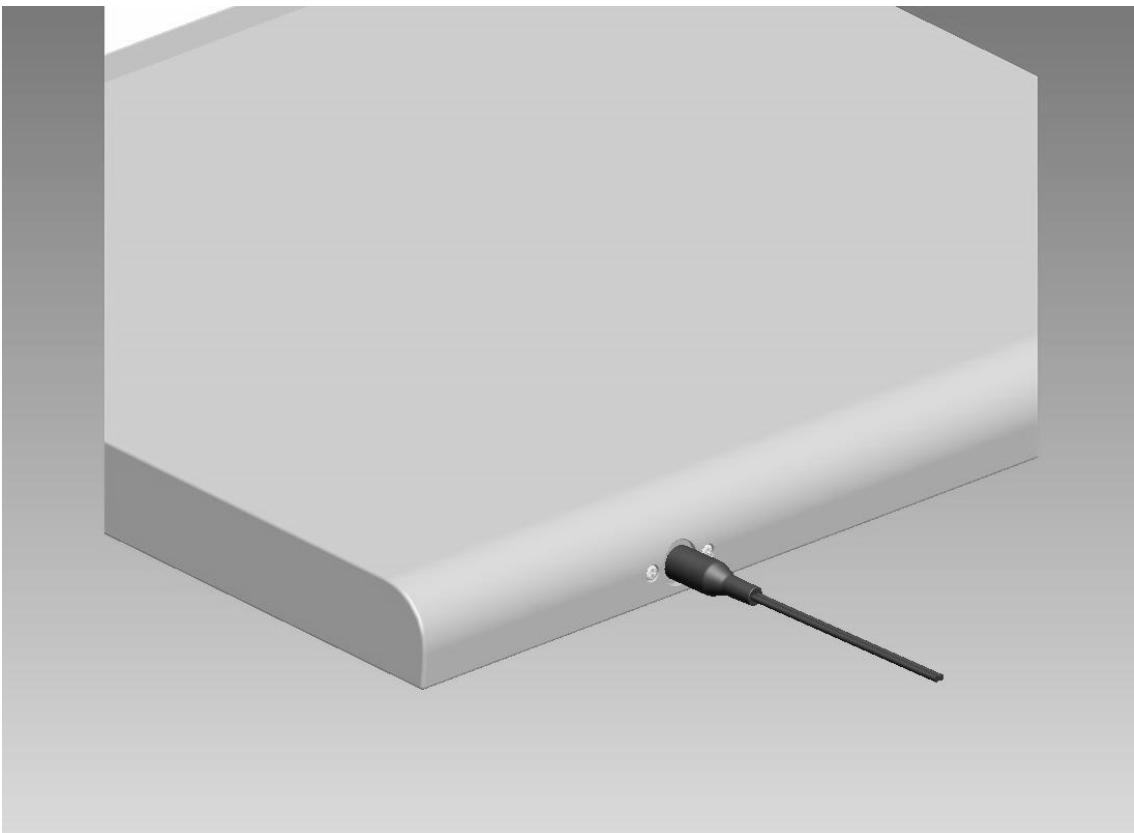

ERROR MESSAGES

■ Low Battery

This message indicates that the battery should be replaced soon. If the battery voltage drops too low, continued use with a low battery can affect weighing accuracy. Remove the old battery and replace with a new battery for operation.

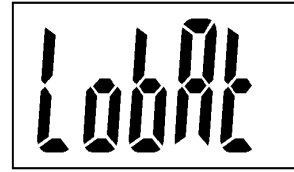


■ Over Load

The load is over the scale capacity. Reduce the load and try again. If the trouble still exists, please call your scale service representative.



■ Over Zero

The load is over the limit the scale can zero when powering on. Reduce the load and try again. If the trouble still exists, please call your scale service representative.

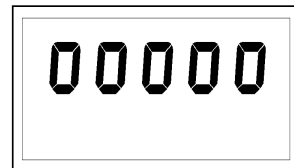

■ Under Zero

The load is under the limit when powering on. Power OFF scale and try again. If the trouble still exists, call your scale service representative.



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	11
ESPECIFICACIONES	11
FUNCIONES DE LAS TECLAS	12
INDICADORES EN PANTALLA	12
ARMADO DE LA BÁSCULA	13
INSTALACIÓN/REEMPLAZO DE LA BATERÍA	15
ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN DE CA	16
MENSAJES DE ERROR	17

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA FCC

Este equipo genera, usa y puede irradiar radiofrecuencias, y si no se instala y usa de acuerdo con el manual de instrucciones, puede provocar interferencias a las comunicaciones de radio. Se ha puesto a prueba y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo de cálculo Clase A de acuerdo con la Subparte J de la Parte 15 de las normas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), que están diseñadas para brindar una protección razonable contra tales interferencias cuando se utiliza en un entorno comercial. El uso de este equipo en un área residencial puede provocar interferencias, en cuyo caso el usuario será responsable de tomar las medidas necesarias para corregirlas.

El folleto "How to Identify and Resolve Radio TV Interference Problems" preparado por la Comisión Federal de Comunicaciones puede resultarle útil. Está disponible en la Oficina de Impresión del Gobierno de los EE. UU., Washington, D.C. 20402. Solicite el material n.º 001-000-00315-4.

ELIMINACIÓN ADECUADA

Cuando este dispositivo llega al final de su vida útil, se debe desechar de manera correcta. No debe desecharse en un relleno sanitario municipal sin clasificar. Dentro de la Unión Europea, este dispositivo se debe devolver al distribuidor donde fue adquirido para su eliminación adecuada. Esto se rige por la Directiva de la UE 2002/96/EC. En Norteamérica, el dispositivo debe desecharse de acuerdo con las leyes locales relativas a la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos.

Es responsabilidad de todos ayudar a conservar el medioambiente y reducir los efectos sobre la salud de los seres humanos de las sustancias peligrosas contenidas en los equipos eléctricos y electrónicos. Colabore asegurándose de que este dispositivo se elimine adecuadamente. El símbolo que se muestra a la derecha indica que este dispositivo no se debe desechar en los programas de eliminación de desechos municipales sin clasificar.



DERECHOS DE PROPIEDAD

Todos los derechos reservados. Está prohibida la reproducción o el uso de contenidos editoriales o gráficos, de cualquier forma, sin el permiso expreso por escrito. No se asume responsabilidad civil sobre patentes respecto del uso de la información contenida en el presente documento.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Aunque se han tomado todas las precauciones en la preparación de este manual, el vendedor no asume responsabilidad alguna por errores u omisiones. Tampoco se asume responsabilidad legal alguna por daños que resulten del uso de la información contenida en el presente documento. Se han verificado la precisión y facilidad de aplicación de todas las instrucciones y diagramas; sin embargo, el éxito y seguridad al trabajar con herramientas depende en gran medida de la precisión, habilidad y precaución de la persona. Por esto, el vendedor no puede garantizar el resultado de cualquier procedimiento incluido en el presente documento. Tampoco pueden asumir responsabilidad por ningún daño a la propiedad o lesión a personas ocasionados por tales procedimientos. Las personas que realicen tales procedimientos lo hacen completamente por su cuenta y riesgo.

Número de serie _____
Fecha de compra _____
Adquirido en _____

CONSERVE ESTA INFORMACIÓN PARA SU USO FUTURO

INTRODUCCIÓN


La báscula para bebés modelo MB130 es una báscula a batería para bebés con una capacidad para 20 kg (44 lb). Está equipada con una bandeja para bebés extraíble para permitir el pesaje de niños pequeños. Con una batería de 9 voltios (no incluida) puede usarse como una báscula portátil o con el Adaptador de alimentación de CA de 12 VCC incluido puede usarse en un lugar fijo.

Este manual incluye información sobre el uso de esta báscula. Léalo antes de intentar usarla, y manténgalo a mano para referencia futura.

ESPECIFICACIONES

Capacidad:	10/20 kg (22/44 lb)
División:	0 a 10kg x 5g (0 a 22lb x 0.01lb) 10 a 20kg x 10g (22 a 44lb x 0.02lb)
Bandeja:	Extraíble para permitir el pesaje de bebés o niños pequeños con la báscula
Unidades de peso:	kg/lb
Teclas de función:	ON/ZERO/OFF (ENCENDIDO/CERO/APAGADO), UNIT (UNIDAD) y HOLD (MANTENER)
Tiempo de estabilización:	1 a 2 segundos
Temperatura de uso:	5° a 35°C (41° a 95°F)
Pantalla:	Pantalla LCD de 25 mm (1,0") con 5 dígitos activos
Requisitos de alimentación:	Batería de 9 voltios (no incluida) o Adaptador de alimentación de CA de 12 VCC (incluido)
Función de ahorro de energía:	Apagado automático después de 2 minutos
Dimensiones:	
Bandeja:	560 mm Largo x 286 mm Ancho x 96 mm Alto (22" x 11 1/4" x 3 3/4")
Báscula:	320 mm Largo x 310 mm Ancho x 33 mm Alto (12 5/8" x 12 1/4" x 1 5/16")

FUNCIONES DE LAS TECLAS

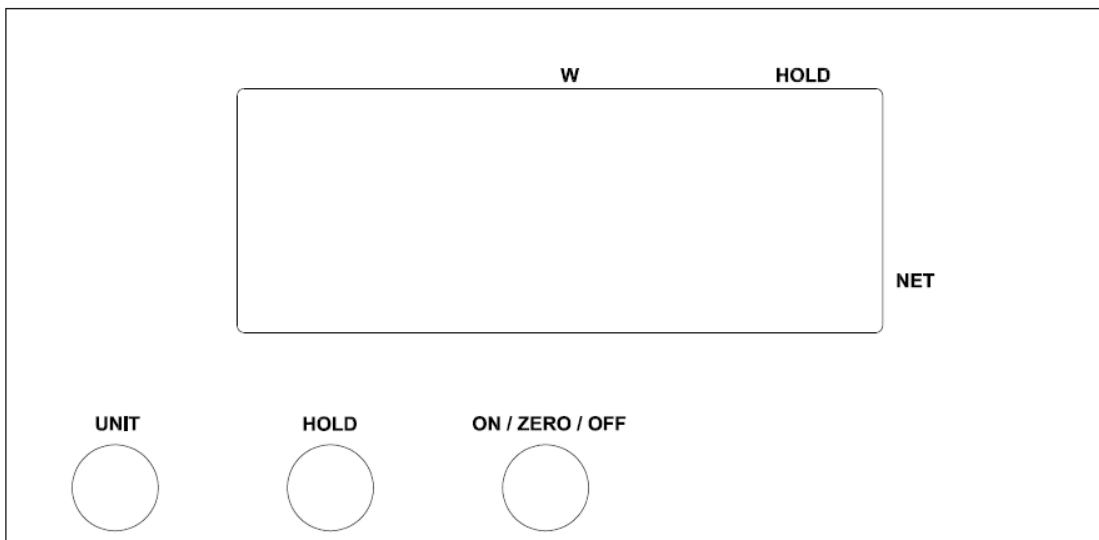

TECLAS

ON/ZERO/OFF (ENCENDIDO/CERO/APAGADO)

1. Presione esta tecla para encender la báscula.
2. Presione esta tecla para llevar la báscula a cero antes de comenzar la operación de pesaje o para restar el peso de un artículo (por ejemplo, una manta, una almohadilla o un juguete) en la balanza ($\pm 2\%$ de la capacidad total).
3. Mantenga presionada esta tecla por 3 segundos para apagar la báscula.

MANTENER

1. Presione esta tecla para mantener el valor del peso al realizar el pesaje.
2. Presione esta tecla de nuevo para desactivar la función de mantenimiento del peso.

UNIDAD


1. Presione esta tecla para cambiar las unidades de peso de lb a kg o de kg a lb.

INDICADORES EN PANTALLA


- W** El indicador **W** está ubicado en la parte superior central de la pantalla. Se encenderá una flecha para indicar que el peso está en cero y que la báscula está lista para ser usada.
- HOLD** El indicador **HOLD** (mantener) está ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se encenderá una flecha y se mostrará **HOLD** en la pantalla por unos segundos para indicar que el peso del último pesaje se está manteniendo y que se puede sacar al bebé o niño de la báscula. Esta función es útil si el bebé o niño se mueve mucho.
- NET** El indicador **NET** (neto) está ubicado en la esquina derecha de la pantalla. Se encenderá una flecha para mostrar que el peso que se muestra es el peso neto. El peso neto se determina restando el peso de un artículo de la balanza, como por ejemplo, mantas, almohadillas o juguetes. Esto garantiza que sólo se mostrará el peso del bebé o niño.
- kg** El indicador **kg** se enciende para indicar que el peso que se muestra está en kilogramos.
- lb** El indicador **lb** se enciende para indicar que el peso que se muestra está en libras.

ARMADO DE LA BÁSCULA

1. Instale la bandeja desde la parte posterior de la báscula, deslizándola hacia el frente de la báscula (hacia la pantalla). Tenga en cuenta que la flecha en la bandeja debe apuntar hacia el frente de la báscula.

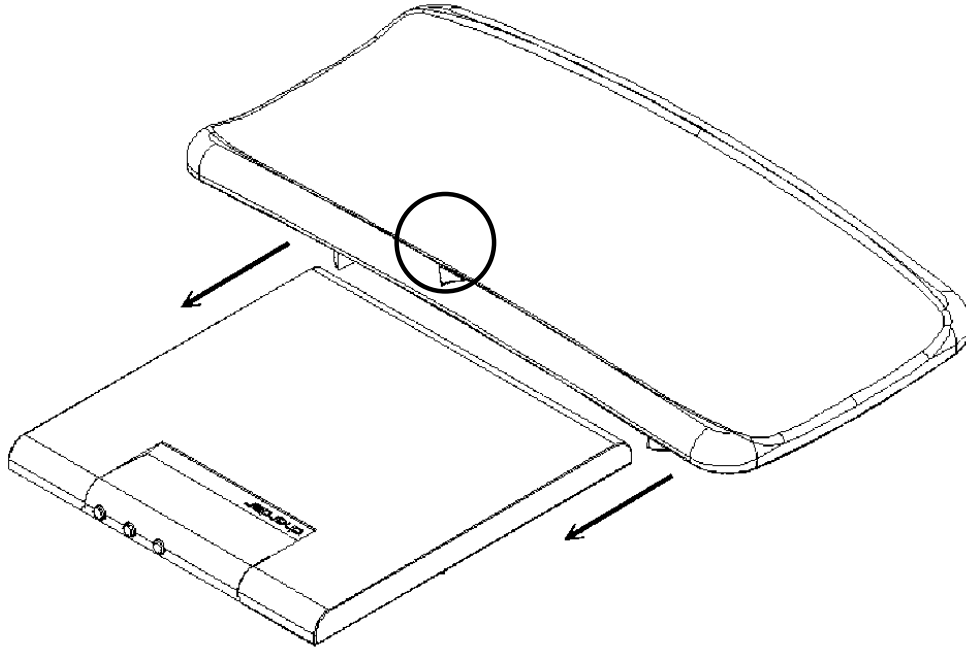


2. Coloque la báscula boca abajo para atornillar la bandeja a la plataforma correctamente.

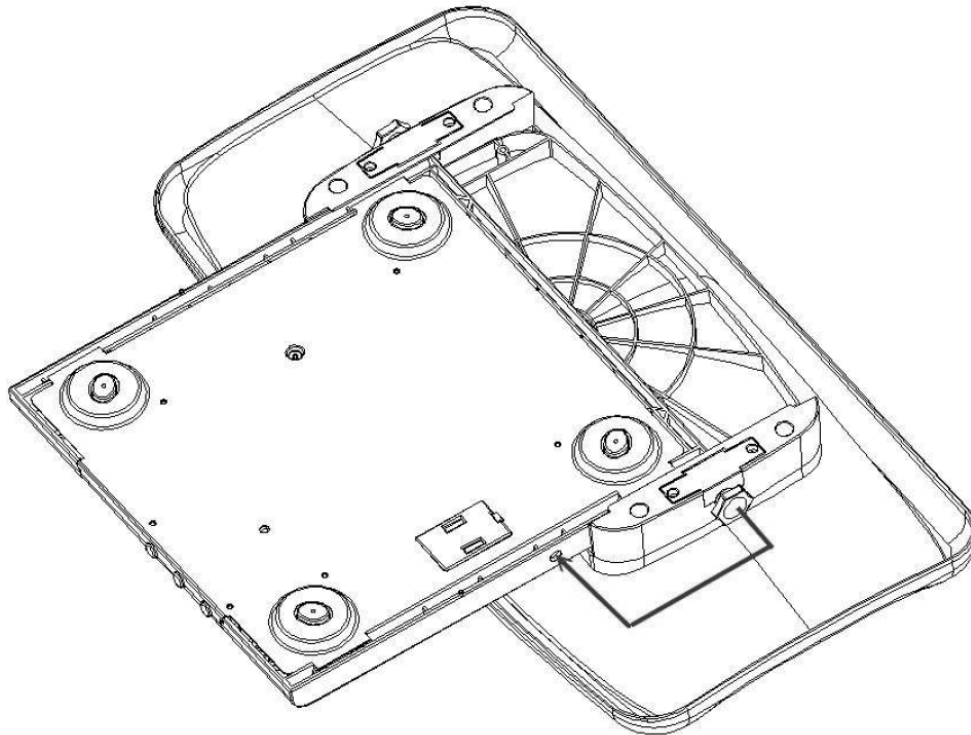


ARMADO DE LA BÁSCULA, CONT.

3. Ajuste los tornillos con la mano para fijar la bandeja a la plataforma.

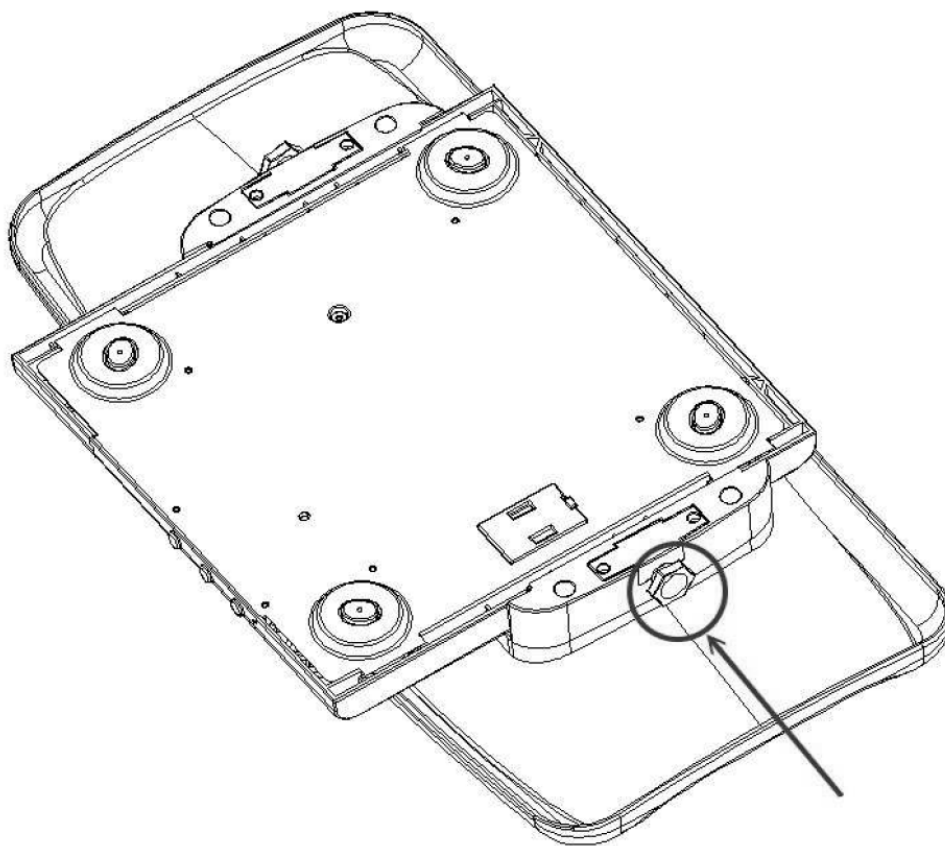

4. El armado de la báscula está completo. Voltee la báscula para comenzar los procedimientos de pesaje.

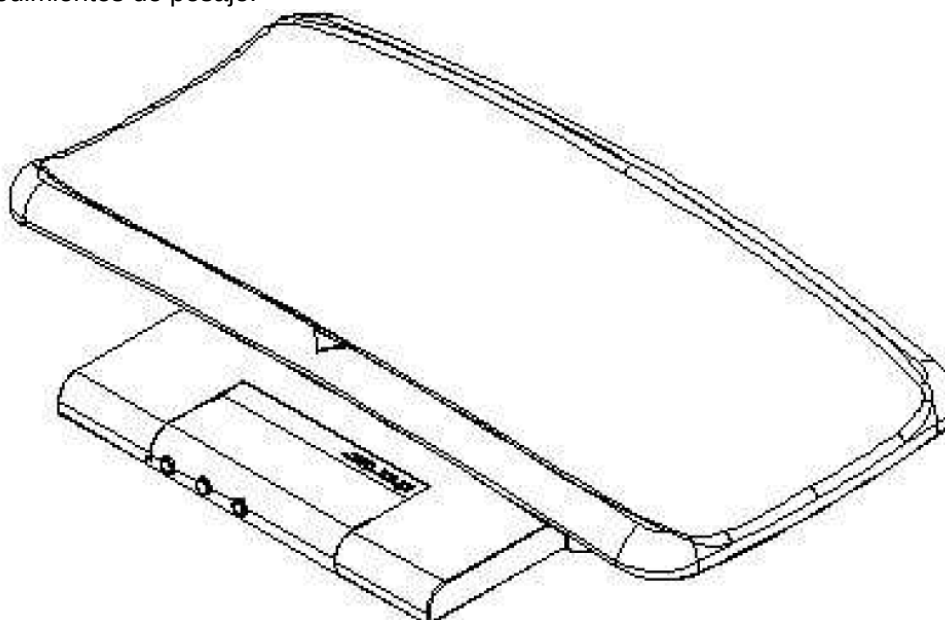


INSTALACIÓN/REEMPLAZO DE LA BATERÍA

1. Voltee la báscula para encontrar el alojamiento de la batería.



2. Quite el alojamiento de la batería de la báscula.

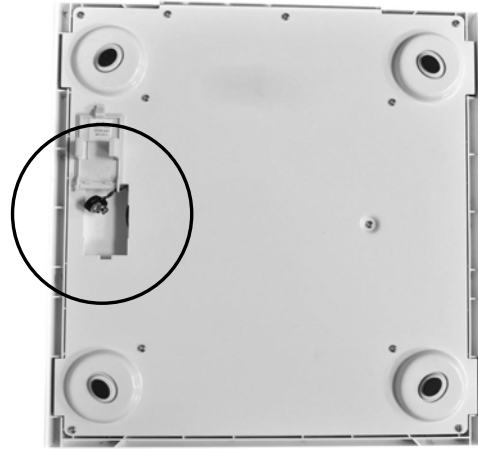

3. La báscula utiliza una batería de 9 VCC.



4. Instale la batería de 9 VCC.




5. Vuelva a colocar el alojamiento de la batería en la báscula para completar el procedimiento.




ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN DE CA

1. Encuentre el conector del adaptador de alimentación de CA en la parte posterior de la báscula.

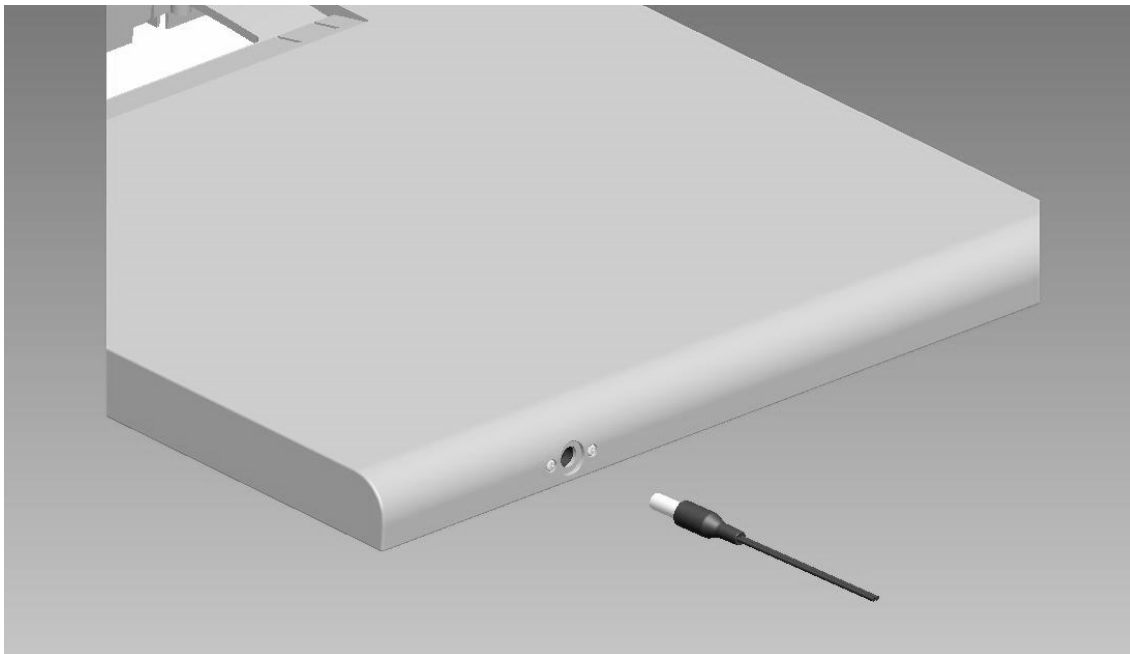


2. Instale el adaptador de alimentación de CA en el conector de la parte posterior de la báscula como se muestra a continuación.

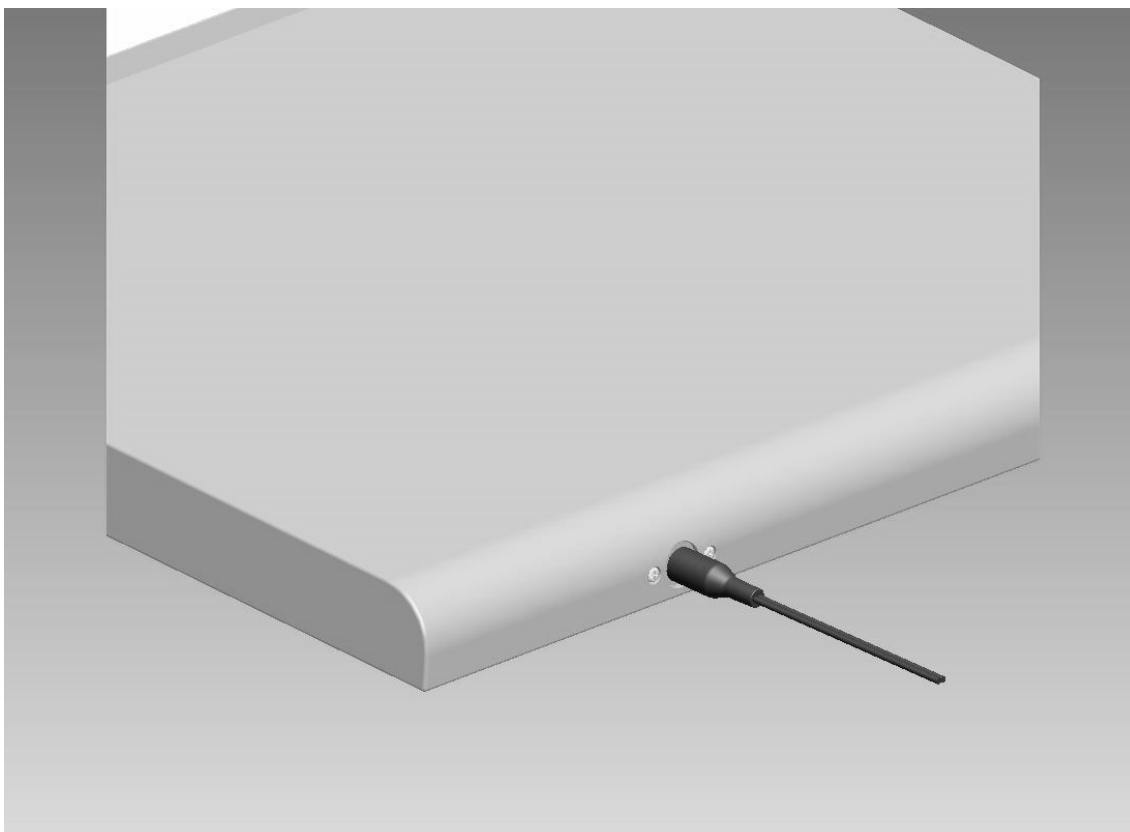

MENSAJES DE ERROR


■ Batería baja

Este mensaje indica que la batería se debe reemplazar pronto. Si el voltaje de la batería baja demasiado, el uso continuo con una batería descargada puede afectar la precisión del pesaje. Quite la batería vieja y reemplácela por una batería nueva para su uso.

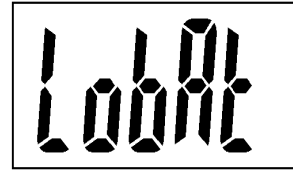


■ Sobrecarga

La carga se encuentra por encima de la capacidad de la báscula. Reduzca la carga e inténtelo de nuevo. Si el problema continúa, llame a su representante de mantenimiento de la báscula.

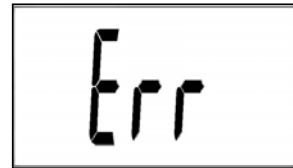


■ Sobre cero

La carga se encuentra sobre el límite que la báscula puede llevar a cero al encenderse. Reduzca la carga e inténtelo de nuevo. Si el problema continúa, llame a su representante de mantenimiento de la báscula.

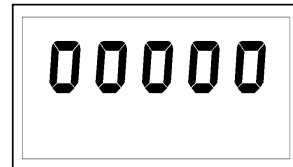

■ Bajo cero

La carga se encuentra debajo del límite cuando se enciende. Apague la báscula e inténtelo de nuevo. Si el problema continúa, llame a su representante de mantenimiento de la báscula.

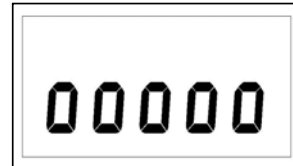

SOMMAIRE

INTRODUCTION	21
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	21
FONCTIONS DES TOUCHES	22
INDICATEURS À L'ÉCRAN	22
MONTAGE DE LA BALANCE	23
INSTALLATION/REMPLACEMENT DE LA PILE	25
ADAPTATEUR D'ALIMENTATION CA	26
MESSAGES D'ERREUR	27

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX EXIGENCES DE LA FCC

Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions de ce manuel, peut causer des interférences perturbant les communications radio. Cet appareil a été testé et jugé conforme aux restrictions des périphériques numériques de classe A, selon l'article 15, section J de la réglementation de la FCC (Commission Fédérale des Communications), conçues pour offrir une protection suffisante contre de telles interférences dans le cadre d'une utilisation en environnement commercial. L'utilisation de cet appareil dans le cadre d'une zone résidentielle peut provoquer des interférences et l'utilisateur doit alors s'assurer que toutes les mesures nécessaires sont prises afin de corriger ces interférences.

Dans ce contexte, le livret « How to Identify and Resolve Radio TV Interference Problems », conçu par la Commission Fédérale des Communications, peut être utile. Ce livret peut être obtenu par le biais du service des publications gouvernementales des États-Unis, à Washington. 20402. Numéro de stock 001-000-00315-4.

ÉLIMINATION APPROPRIÉE

Lorsque ce dispositif atteint sa fin de vie utile, il doit être éliminé de manière appropriée. Il ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Au sein de l'Union Européenne, pour une élimination appropriée, ce dispositif doit être renvoyé au distributeur auprès duquel il a été acheté, conformément à la Directive UE 2002/96/CE. En Amérique du Nord, ce dispositif doit être éliminé conformément à la législation locale relative à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Il en va de la responsabilité de tous de respecter l'environnement et de réduire les effets nuisibles sur la santé de l'homme provoqués par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques. Veuillez respecter cet engagement en vous assurant que cet appareil est éliminé de façon correcte. Le symbole figurant à droite montre que ce dispositif ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.



DROIT D'AUTEUR

Tous droits réservés. Toute reproduction ou utilisation de quelque manière que ce soit du contenu rédigé ou illustré est interdite sans autorisation écrite expresse. Aucune responsabilité relative au brevet n'est par ailleurs engagée concernant l'utilisation des informations contenues dans le présent document.

DÉNI DE RESPONSABILITÉ

Bien que toutes les précautions aient été prises lors de la préparation de ce manuel, le Vendeur n'assume aucune responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions. Aucune responsabilité n'est par ailleurs engagée concernant les dommages provoqués par l'utilisation des informations contenues dans le présent document. Bien que la précision et la facilité d'application des instructions et des schémas aient été vérifiées, la sécurité et l'efficacité d'un travail effectué avec un outil dépendent grandement de la précision, des compétences et des précautions appliquées à l'échelle individuelle. Pour cette raison, le Vendeur n'est pas en mesure de garantir le résultat des procédures contenues dans le présent manuel. Celui-ci n'est pas non plus en mesure d'assumer une quelconque responsabilité pour tout dommage sur les biens ou toute blessure sur les personnes résultant de ces procédures. Les personnes qui s'engagent dans les procédures d'utilisation le font à leurs propres risques.

Numéro de série _____

Date d'achat _____

Acheté auprès de _____

CONSERVER CES INFORMATIONS POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE

INTRODUCTION


Le pèse-bébé modèle MB130 est une balance d'une capacité de 20 kg (44 livres), fonctionnant avec une pile. La balance est équipée d'un plateau amovible afin de permettre la pesée de petits enfants. Avec une pile de 9 volts (non fournie), la balance peut être utilisée comme balance portable, ou utilisée dans un endroit fixe à l'aide de l'adaptateur de 12 VCC.

Ce manuel contient les informations concernant le fonctionnement de cette balance. Lire les instructions avant toute utilisation de la balance et garder le manuel à portée de main pour toute référence future.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité :	10/20 kg (22/44 lb)
Graduation :	0 à 10kg x 5g (0 à 22lb x 0.01lb) 10 à 20kg x 10g (22 à 44lb x 0.02lb)
Plateau :	Plateau amovible afin de permettre la pesée de bébés ou de petits enfants.
Unités de poids :	livres/kg
Touches de fonction :	ON/ZERO/OFF (MARCHE/ZÉRO/ARRÊT), UNIT (UNITÉ) et HOLD (BLOCAGE)
Temps de stabilisation :	1 à 2 secondes
Température de fonctionnement :	5°C à 35°C (41° à 95°F)
Affichage :	Écran LCD 25 mm (1,0 po) avec 5 chiffres actifs
Alimentation électrique :	Pile de 9 volts (non fournie) ou Adaptateur CA de 12 VCC (fourni)
Fonction d'économie d'énergie :	Arrêt automatique passé un délai de 2 minutes
Dimensions :	
Plateau :	560 L x 286 l x 96 H mm (22 po x 11 1/4 po x 3 3/4 po)
Balance :	320 L x 310 l x 33 H mm (12 5/8 po x 12 1/4 po x 1 5/16 po)

FONCTIONS DES TOUCHES

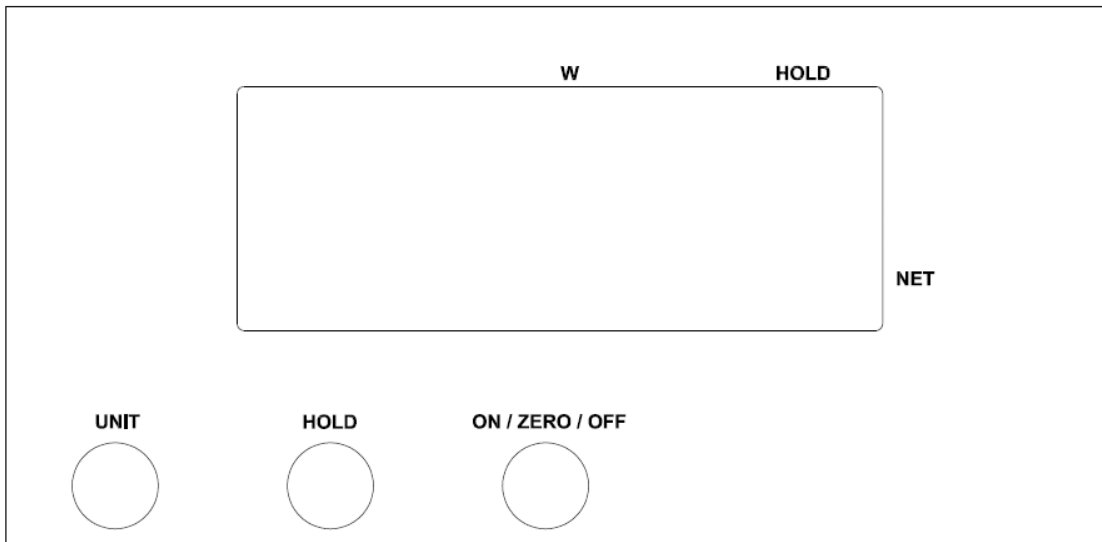

TOUCHES

ON/ZERO/OFF (MARCHE/ZÉRO/ARRÊT)

1. Appuyer sur cette touche pour mettre la balance en MARCHE.
2. Appuyer sur cette touche pour remettre la balance à zéro avant de commencer la pesée ou pour remettre à zéro le poids de n'importe quel élément sur la balance (comme une couverture, une couche ou un jouet) ($\pm 2\%$ de la capacité totale).
3. Appuyer sur cette touche pendant 3 secondes pour ÉTEINDRE la balance.

HOLD (BLOCAGE)

1. Appuyer sur cette touche afin de bloquer la valeur du poids lors de la pesée.
2. Appuyer de nouveau sur cette touche afin de désactiver la fonction blocage.

UNIT (UNITÉ)


1. Appuyer sur cette touche pour modifier les unités de pesage de lb en kg ou de kg en lb.

INDICATEURS À L'ÉCRAN


- W** L'indicateur **W** est situé au centre en haut de l'écran. Une flèche s'allume pour indiquer que le poids est remis à zéro et que la balance est prête à être utilisée.
- HOLD** L'indicateur **HOLD** (BLOCAGE) est situé en haut à droite de l'écran. Une flèche s'allume et **HOLD** s'affiche à l'écran pendant quelques secondes pour indiquer que le poids de la dernière pesée a été enregistré et que le bébé ou l'enfant peut être ôté de la balance. Cette fonction est utile si le bébé ou l'enfant est très actif.
- NET** L'indicateur **NET** est situé dans le coin à droite de l'écran. Une flèche s'allume pour indiquer que le poids affiché est un poids net. Le poids net s'obtient par la mise à zéro du poids d'un objet comme une couverture, une couche ou un jouet. Cela garantit que le poids du bébé ou de l'enfant seul est affiché.
- kg** L'indicateur **kg** s'allume pour indiquer que le poids affiché est en kilogrammes.
- lb** L'indicateur **lb** s'allume pour indiquer que le poids affiché est en livres.

MONTAGE DE LA BALANCE

1. Installer le plateau depuis l'arrière de la balance, en le faisant coulisser vers l'avant de la balance (vers l'écran). La flèche sur le plateau doit pointer vers l'avant de la balance.

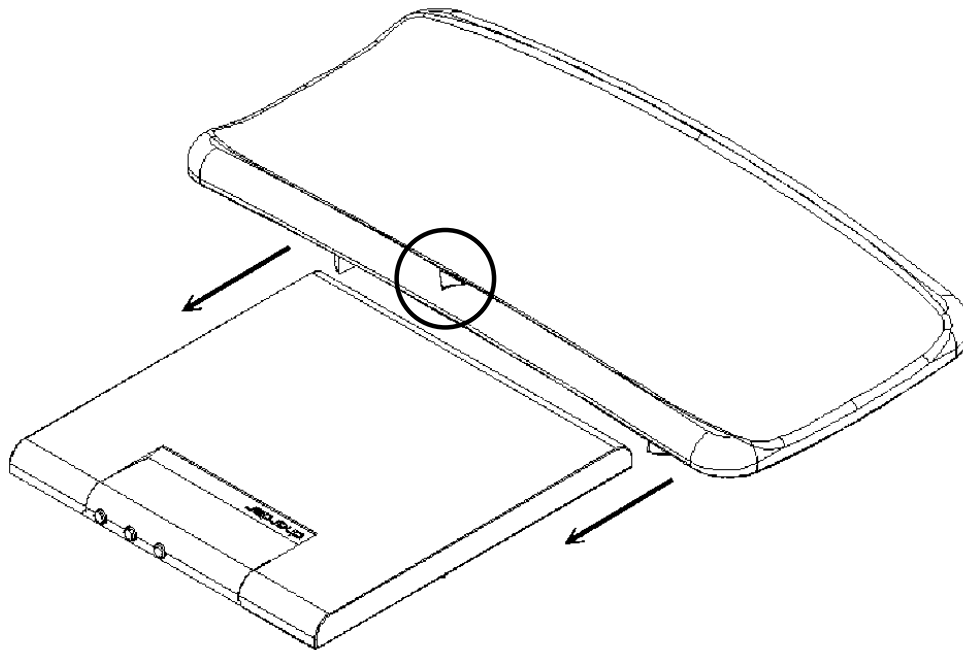


2. Retourner la balance pour visser convenablement le plateau sur la plateforme.

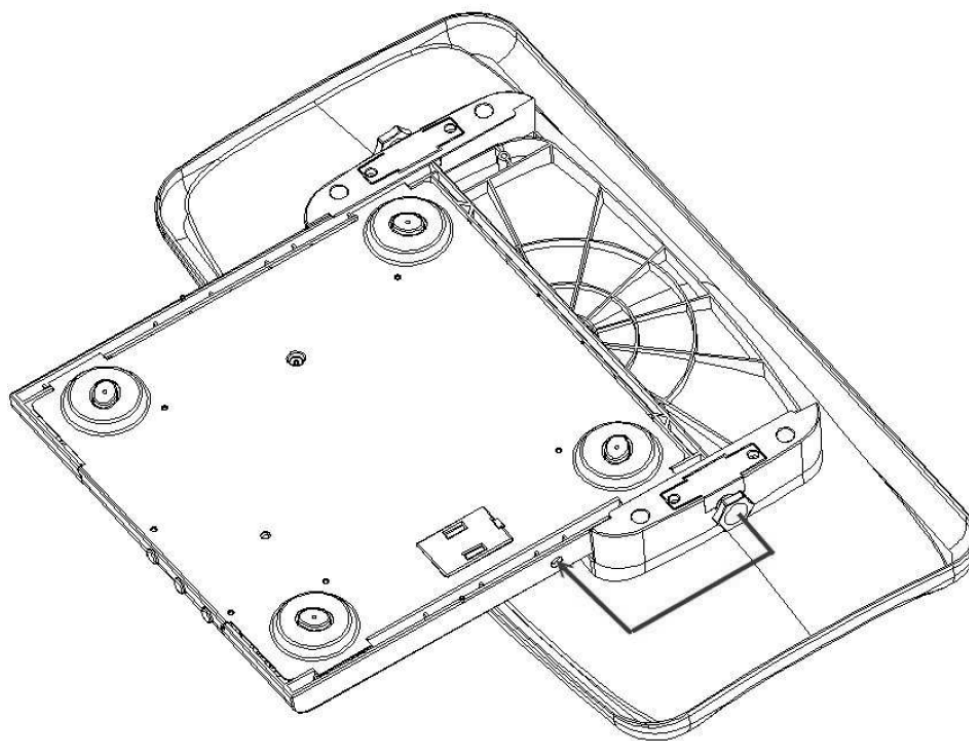


MONTAGE DE LA BALANCE (SUITE)

3. Serrer les vis à la main pour fixer le plateau à la plateforme

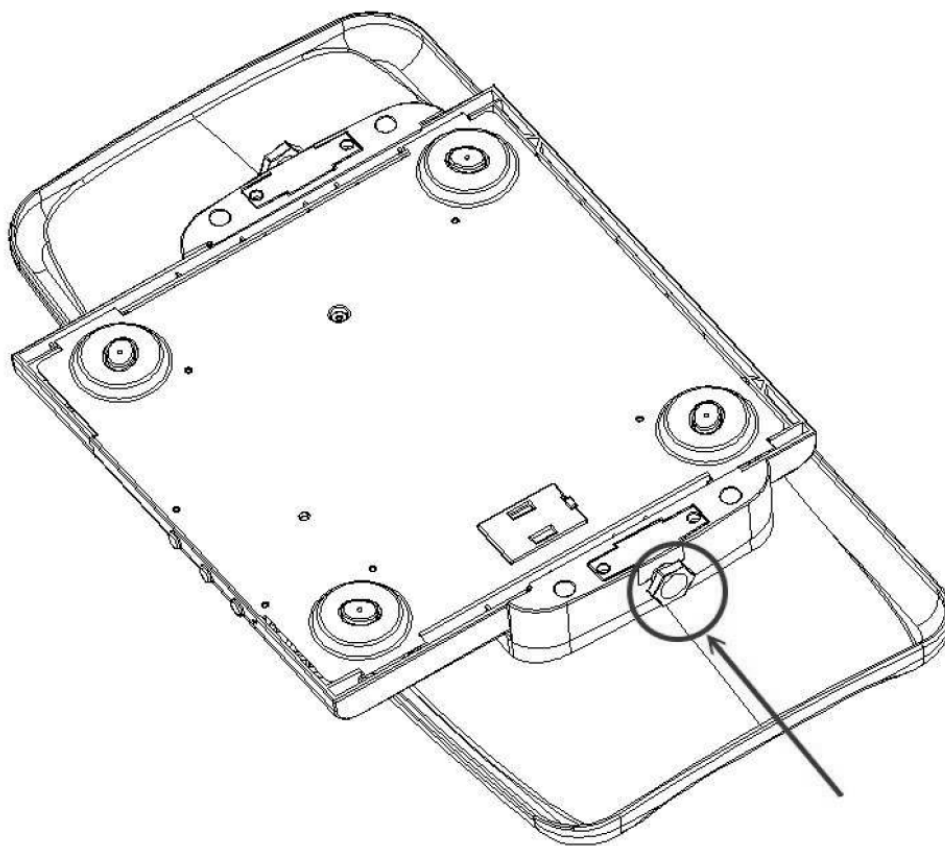

4. Le montage de la balance est terminé. Retourner la balance pour commencer les opérations de pesée.

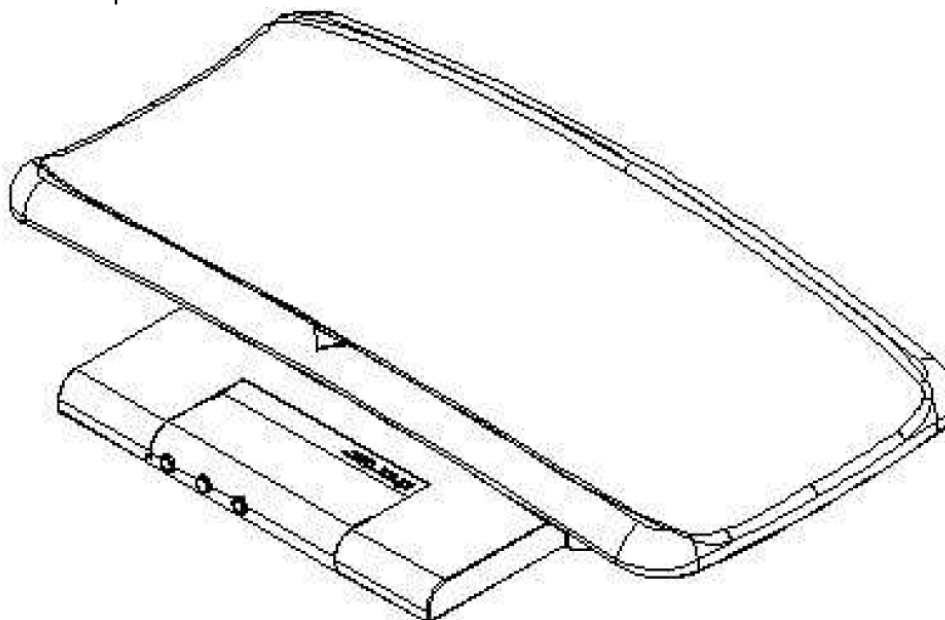

INSTALLATION/REEMPLACEMENT DE LA PILE

1. Retourner la balance pour localiser le compartiment de la pile.



2. Retirer le logement de pile de la balance.



3. La balance fonctionne à l'aide d'une pile de 9 VCC.



4. Installer la pile de 9 VCC.




5. Replacer le logement de pile dans la balance pour terminer la procédure.




ADAPTATEUR D'ALIMENTATION CA

1. Localiser la prise d'adaptateur CA à l'arrière de la balance.

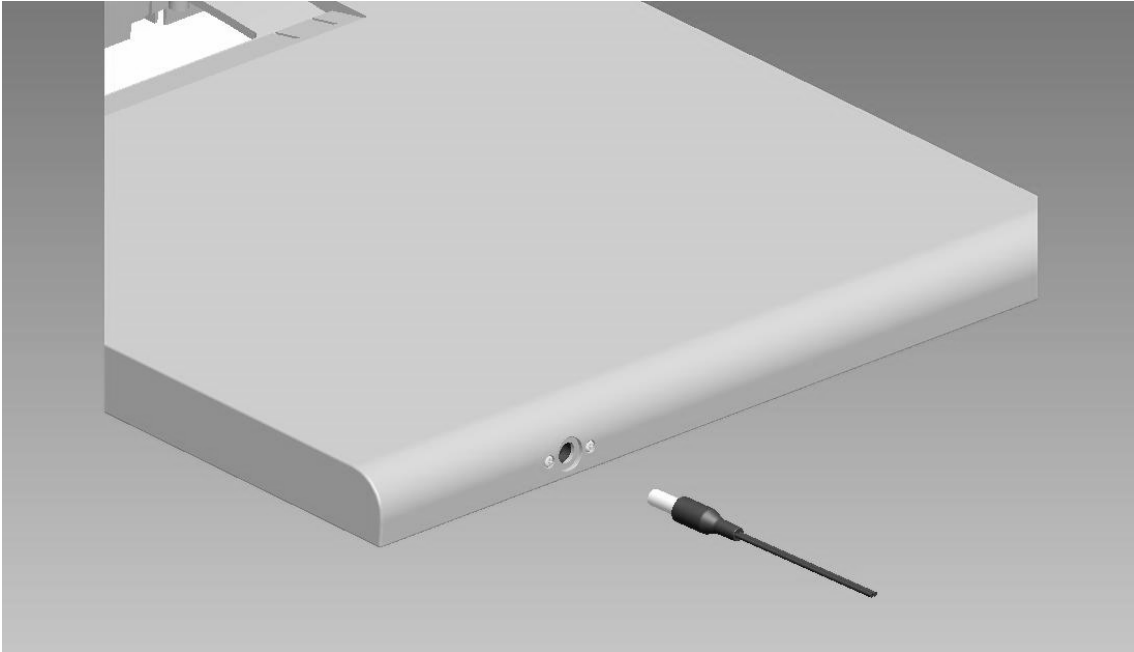


2. Brancher l'adaptateur CA dans la prise située à l'arrière de la balance, comme indiqué ci-dessous.

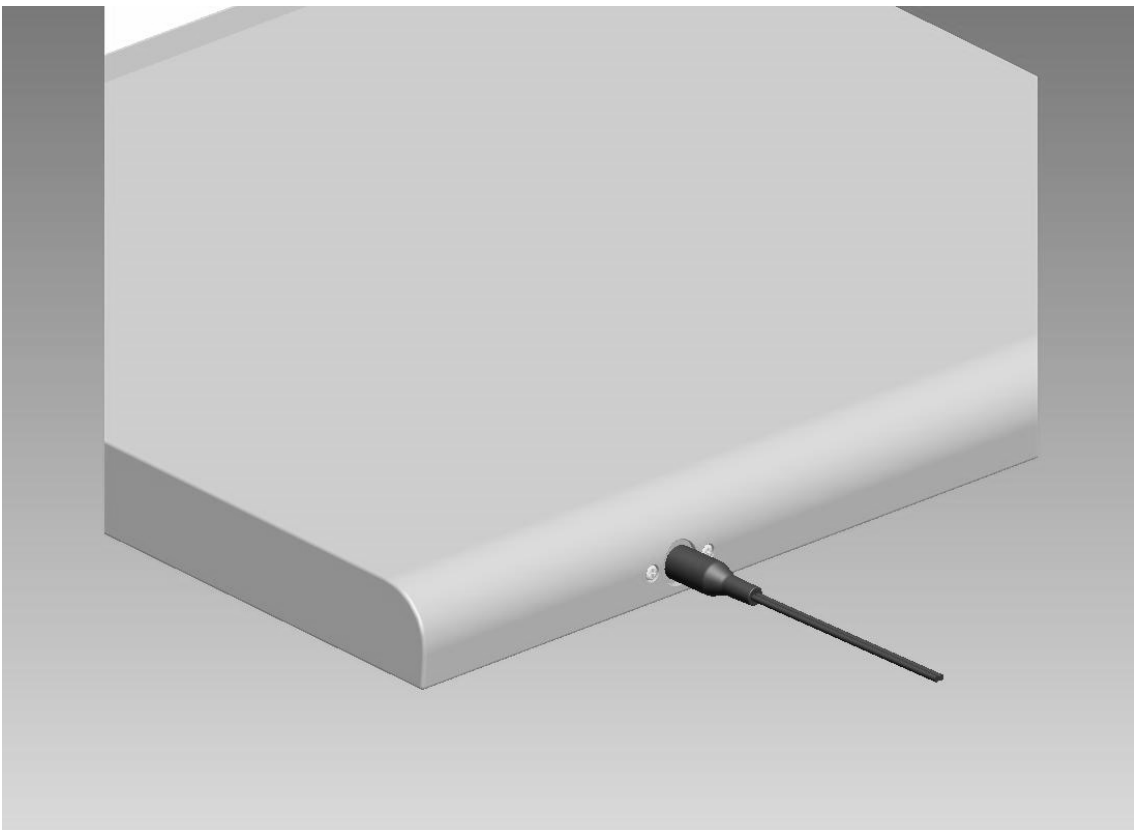

MESSAGES D'ERREUR


■ Batterie faible

Ce message indique que la pile doit bientôt être remplacée. Si la tension de la pile chute trop bas, une utilisation prolongée avec une pile faible peut affecter de façon négative la précision de la pesée. Retirer la pile usagée et la remplacer par une pile

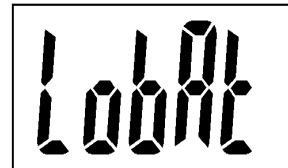

■ Surcharge

La charge dépasse la capacité de la balance. Réduire la charge et essayer de nouveau. Si le problème persiste, veuillez contacter le service client.

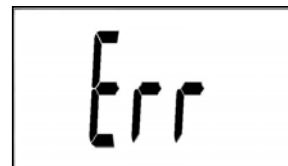

■ Au-dessus de zéro

La charge est supérieure à la capacité de mise à zéro de la balance lors de sa mise en marche. Réduire la charge et essayer de nouveau. Si le problème persiste, veuillez contacter le service client.



■ En dessous de zéro

La charge est inférieure à la limite lors de la mise en marche de la balance. Éteindre la balance et essayer de nouveau. Si le problème persiste, veuillez contacter le service client.

