



dosificaciones


## 8432-CH

## BASCULA DIGITAL PEDIATRICA CON ASIENTO RECLINABLE

La serie pediátrica 8432-CH de DETECTO con silla reclinable es ideal para uso en clínicas y consultorios para medición de peso de bebes e infantes. La bascula tiene una silla plástica en forma de concha para optimo confort del bebe con una base estable y duradera de acero.



Modelo	8432-CH	8432-CH-AC	8432KG-CH
Capacidad	44 lb x 0.05 lb / 20 kg x 0.02 kg	44 lb x 0.05 lb / 20 kg x 0.02 kg	20 kg x 0.02 kg
Adaptador AC		•	
Altura	26 in / 66 cm		
Pantalla	Seis dígitos, siete segmentos, 0.7" (17.8 mm) alto LCD		
Poder	Seis "AA" Alcalinas, Ni-Cad o baterías NiMH (no incluidas) O un adaptador AC opcional 100 to 240V AC 50/60Hz 12V DC 1A de pared UL/CSA listado (Cardinal número de parte 6800-1045). Modelos disponibles con adaptador AC incluido.		
Teclado	Tipo membrana con 5 teclas y 4 flechas direccionales		
Connectividad	Puerto serial RS232		
Peso Despacho	33 lb / 15 kg		

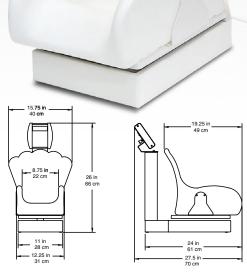



El 8432-CH captura el peso para compensar el movimiento típico del bebe. La pantalla nítida LCD muestra dígitos de 1.90 cms de alto para facil visualizacion.



La silla en forma de concha de DETECTO esta inclinada en el modelo 8432-CH para diversión de los bebes durante el pesaje.



El indicador de peso esta convenientemente situado sobre la silla en forma de concha para fácil visualización de pesomientras el bebe este sentado.

DETECTO se reserve el derecho de mejorar, aumentar o modificar las especificaciones de este modelo sin previo aviso.

## DETECTO www.Detecto.com

102 E. Daugherty, Webb City, MO 64870 USA Ph: 417-673-4631 or 1-800-641-2008 Fax: 417-673-2153 www.Detecto.com

## **VENDIDO POR:**