

## Serie **PD**

# BÁSCULAS MÉDICAS PROFESIONALES

PRECISION PROFESIONAL: PESO • ALTURA • IMC



Detecto Modelo  
PD300



Detecto Modelo PD100  
Bajo Perfil  
Básculas con Índice  
de Masa Corporal



**Detecto Modelo PD100**  
**Báscula Médica de Bajo Perfil con Pantalla Remota**



## Modelo PD100

### Báscula de Bajo Perfil con Pantalla Remota

La pantalla remota de la PD100 puede ser ubicada en escritorios, mesones o incluso sobre la pared (ver abajo) a una altura de 87" o 220cm de la báscula. La pantalla LCD provee de una lectura clara de 1" o 25mm de altura.

Incluye el tallímetro opcional DHR-WM y las agarraderas en acero inoxidable modelo GBSS 18-WM para crear una estación digital de pesaje completa.



**Modelo opcional de maletín portátil PRODOC-CASE para PD100**



## Modelo PD200

### Báscula Médica que ahorra espacio

La PD200 presenta una pantalla de bajo perfil angulada para fácil lectura del peso. La PD100 y PD200 proveen del cálculo IMC (Índice de Masa Corporal) con teclas direccionales para fácil ingreso de la altura durante el pesaje.



**Modelo PD200**  
**Báscula Médica**  
**Ahorro de Espacio**



**Modelo DHR**  
**Tallímetro Digital de Pared**

**Modelo GBSS18-WM**  
**Agarraderas en Acero Inoxidable de Montaje en Pared**

**Modelo PD100**  
**Báscula Médica de Bajo Perfil con Índice de Masa Corporal**



Impresora  
opcional P50  
puede ser montada  
en cualquiera de  
las basculas  
PD300

09:28, 07/30/12

BMI: 21.5  
Height: 175.5cm  
Weight: 68.5kg

## CONVENIENTE MEDICION A NIVEL DE VISTA

La impresora térmica opcional P50 puede ser montada en cualquiera de los equipos de la serie ProDoc® PD300 para la impresión de Hora, Fecha, Altura e Índice de Masa Corporal. La P50 presenta una operación de dos botones y comunicación serial RS-232 con la bascula (se incluye el cable con la impresora).



### Modelo PD300

Báscula Médica a nivel de vista  
con Índice de Masa Corporal



Tallímetro  
Digital  
Mide desde  
43 - 79 pulgadas  
110 - 200 cm

### Modelo PD300DHR

Báscula Médica a nivel de vista  
con IMC y tallímetro digital



Tallímetro  
Mecánico  
Mide desde  
30 - 78 pulgadas  
76 - 200 cm

### Modelo PD300MHR

Báscula Médica a nivel de vista con  
IMC y tallímetro mecánico



## BÁSCULAS MÉDICAS PROFESIONALES

Burbuja de Nivel

Patas Ajustables con Seguro



Ruedas incorporadas para transporte rápido y sencillo

### La Serie Detecto ProDoc® de Basculas Medicas con Índice de Masa Corporal


les ofrece una báscula con precisión de grado medico y una durabilidad de la marca que usted confía a un precio económico. La PD300DHR presenta una lectura de peso y altura digital en la que el paciente solo tenga que pararse sobre la báscula, eleve el tallímetro y presione una tecla para automáticamente calcular el IMC. La serie PD300 presenta una pantalla a nivel de la vista ofreciendo una visualización de peso/altura/IMC cómoda.



Múltiples opciones para su satisfacer su necesidad especifica


- Capacidad: 550 lb - PD300; 480 lb - PD100/200
- 4-memorias de usuarios
- 6 pilas AA (no incluidas) o Adaptador opcional AC
- Base solida y estable para seguridad del paciente
- Medición de altura (disponible en modelos equipados con tallímetro)
- Calculo de Índice de Masa Corporal (IMC)
- Conversión métrica (Peso y Altura)
- Modo de suspensión (hasta 9 minutos)
- Presenta Auto-apagado seleccionable (hasta 9 minutos)
- Puerto serial y USB en serie PD300
- Disponible con y sin tallímetro
- Pantalla con dígitos de 1" / 25-mm de alto en LCD

## Serie PD300 Funciones de Teclado

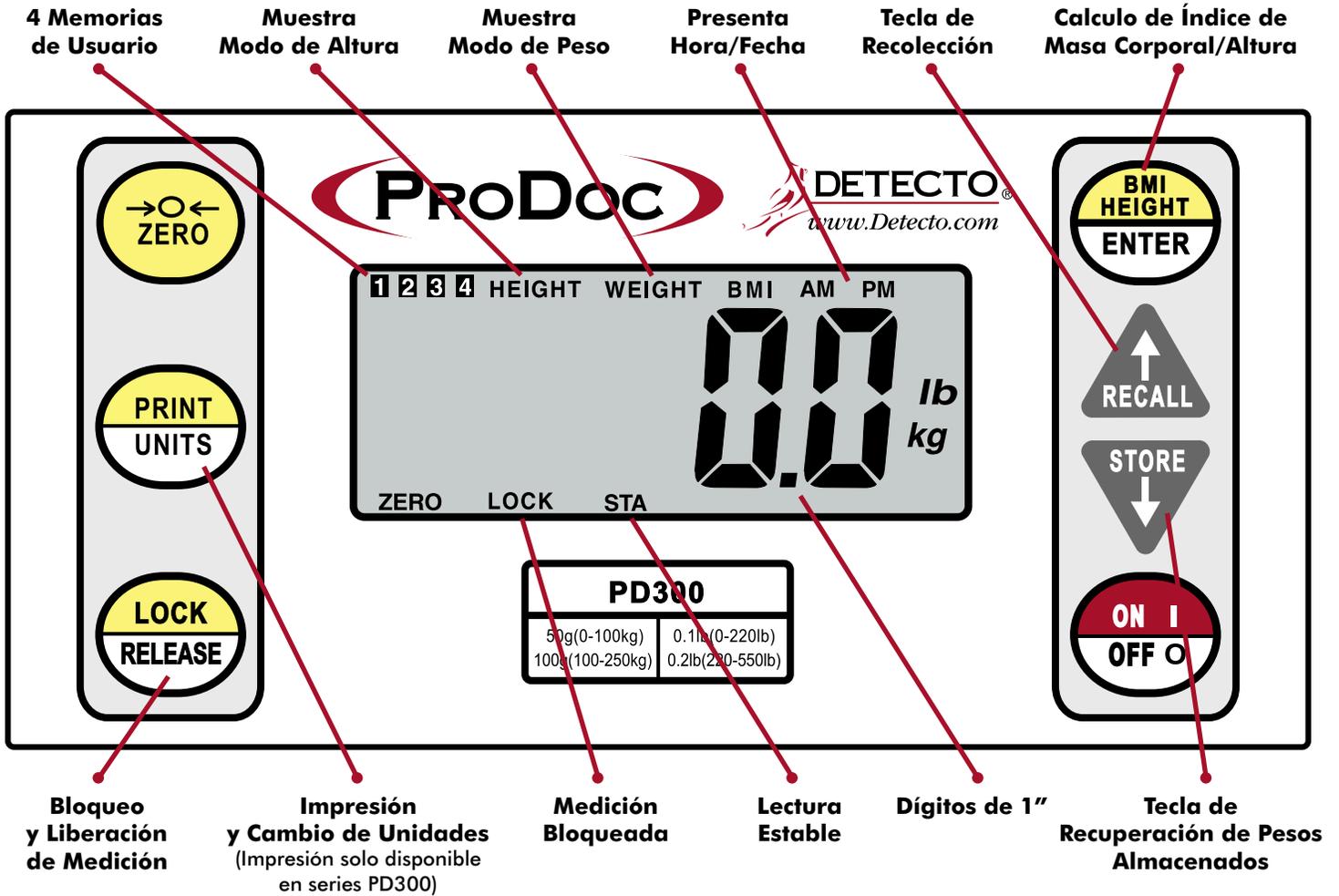

## Ofrece Conectividad USB y Serial para Registros de Pacientes

Vista Trasera del Indicador (Solo la serie PD300 ofrece USB y Puerto Serial / No disponible en PD100-200)

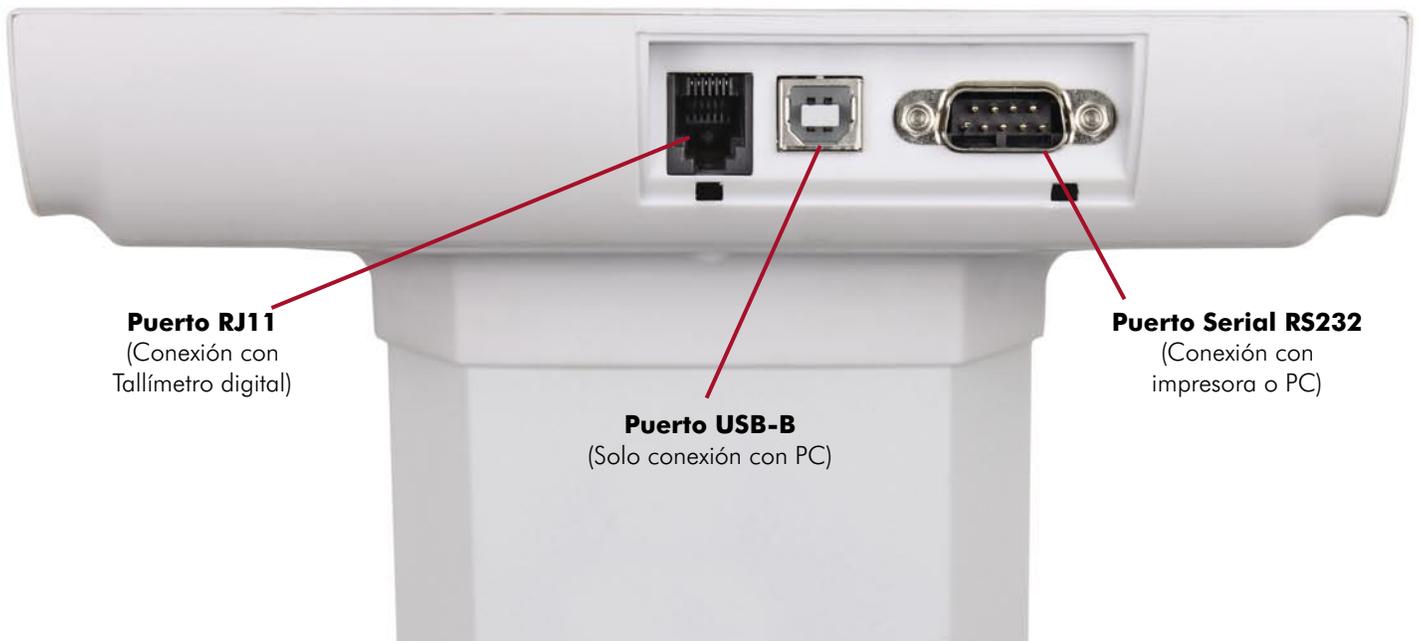



# Serie PD BÁSCULAS MÉDICAS PROFESIONALES

## ESPECIFICACIONES BÁSCULAS SERIE PD

<b>Numero de Modelo</b>	PD100 (Báscula de Piso con Indicador Remoto) PD200 (Báscula de Piso) PD300 (Báscula a nivel de vista) PD300DHR (Báscula a nivel de vista con Tallímetro Digital) PD300MHR (Báscula a nivel de vista con Tallímetro Mecánico)
<b>Capacidad</b> <b>PD100/PD200</b> <b>PD300</b>	480 lb x 0.2 lb (220 kg x 0.1 kg) 0-220 lb x 0.1 lb (0-100 kg x 50 g) 220-550 lb x 0.2 lb (100-250 kg x 100 g)
<b>Unidades de Peso</b>	Libras o Kilogramos (seleccionable)
<b>Requerimientos de Poder</b>	Seis (6) baterías alcalinas "AA" (no incluidas) o adaptador opcional 9V AC/DC de conexión en pared (Cardinal numero de parte PD-AC, incluye enchufe USA). También disponible enchufe UK (PD-UKPLUG) o enchufe EU (PD-EUPLUG).
<b>Pantalla</b>	Cinco dígitos, siete segmentos, 1.0" (25 mm) alto LCD
<b>Temperatura de Operación</b>	50 a 104° F (+10 a +40° C)
<b>Función de Teclado</b>	ON/OFF, BMI HEIGHT/ENTER, LOCK/RELEASE, UNITS (PRINT/UNITS en PD300), ZERO, RECALL y STORE
<b>Dimensiones</b> Pantalla PD100 Base PD100 PD200 PD300 PD300DHR PD300MHR	5.25" H x 7.87" W x 2.125" D (134 mm x 200 mm x 54 mm) 3.33" H x 12.5" W x 13.0" D (85 mm x 318 mm x 330 mm) 8.75" H x 12.6" W x 16.9" D (222 mm x 320 mm x 430 mm) 48.0" H x 12.6" W x 17.0" D (1,219 mm x 320 mm x 433 mm) 48.0" H x 14.0" W x 17.0" D (1,219 mm x 354 mm x 433 mm) 48.0" H x 14.0" W x 17.0" D (1,219 mm x 354 mm x 433 mm)

## ESPECIFICACIONES IMPRESORA P50 (para uso con serie PD300)

<b>Tipo de Impresión</b>	Línea de Puntos Termal Directa
<b>Número de Puntos/Línea</b>	384 puntos
<b>Resolución</b>	203 dpi (8 puntos/mm W x 16 puntos/mm H)
<b>Velocidad Max. Impresión</b>	1.58"/segundo (40 mm/segundo)
<b>Diámetro Max. Rollo Papel</b>	1.97" (50 mm)
<b>Ancho Impresión</b>	1.89" (48 mm)
<b>Temperatura de Operación</b>	68 a 122° F (20 a 50° C)
<b>Fuente de Poder</b>	Adaptador AC 100 - 240VAC entrada, 12V [2A] salida
<b>Conectividad</b>	RS-232 comunicación con bascula (cable incluido)
<b>Dimensiones</b>	4.33" W x 4.33" D x 4.21" H (110 mm x 110 mm x 107 mm)

Detecto Scale se reserva el derecho de mejorar, aumentar, o modificar funciones y especificaciones sin previo aviso.



  
A Division of Cardinal Scale Manufacturing Co.  
203 E. Daugherty, Webb City, MO 64870 USA  
Ph: 417-673-4631 or 1-800-641-2008 Fax: 417-673-5001  
[www.Detecto.com](http://www.Detecto.com)

Vendido Por: