



**SOLO**®  
BALANCES CLINIQUES NUMERIQUES

LA BALANCE SOLO® DE  
**DETECTO**  
EST LA SEULE BALANCE  
DE PESAGE CLINIQUE  
**ÉCONOMIQUE**

- Capacité de 550 lb x 0.2 lb / 250 kg x 0.1 kg
- Poids, taille et indice de masse corporelle
- Taille du plateau L 14 po x P 15 po x H 2.5 po
- 6 piles AA (incluses) ou adaptateur secteur en option
- Toise télescopique

**SOLO**  
BALANCES CLINIQUES NUMERIQUES

**QUALITÉ  
DE PESÉE  
ÉCONOMIQUE  
INÉGALÉE**



Écran à hauteur des yeux  
pour une utilisation aisée  
(H 52 po / 132 cm)

La toise télescopique mesures :  
30 po à 84.5 po /  
76 cm à 214.5 cm

Écran LCD 1 po / 25 mm  
de hauteur, affichage  
clairement visible

Colonne stable et solide comme  
le roc - alliage d'aluminium  
revêtu de poudre blanche

Deux roulettes pour un  
transport facile et rapide

Tapis antidérapant pour  
l'assurance et la stabilité  
du patient

*La marque privilégiée par les  
professionnels cliniques  
du monde entier*

 **DETECTO**  
*www.Detecto.com*



### Indicateur élégant

L'indicateur solo® dispose de 8 boutons simples, facilement identifiables dans toutes les langues.



### Alimentation par piles

Aucune prise de courant disponible, aucun problème! Le solo® est livré avec 6 piles AA pour pouvoir peser n'importe où.



### Prêt pour le DME / DSE

Le port série RS-232 de la balance vous permet de transmettre les données de mesure au logiciel de DME / DSE.



### Indice de masse corporelle

Il suffit de marcher sur la balance pour la pesée et les flèches de défilement vous permettent d'entrer rapidement votre taille pour factoriser l'IMC.



### Toise télescopique

La toise télescopique est située sur le côté de l'écran LCD, de sorte qu'elle n'interfère jamais avec la visualisation des mesures.



### Plateau spacieux et plat

Le plateau surdimensionné de 14 x 15 pouces avec tapis antidérapant ne mesure que 2,4 pouces de hauteur, ce qui permet aux patients d'y monter facilement.



### Adaptateur secteur

Le port CA est situé dans la base de l'appareil, de sorte qu'aucun fil dérangerait ne pende de l'appareil (Adaptateur secteur en option : modèle PD-CA).




### Portable, Roulettes

Deux roulettes intégrées facilitent les déplacements lorsque vous devez transporter le solo®.



BALANCES CLINIQUES NUMERIQUES

<b>Modèle</b>	solo
<b>Capacité</b>	550 lb x 0.2 lb / 250 kg x 0.1 kg
<b>Taille du plateau</b>	L 14 po x P 15 po x H 2.4 po / L36 cm x P 38 cm x H 6 cm
<b>Unités de poids</b>	Livres ou kilogrammes (sélectionnables lors de l'initialisation au démarrage ; modifiables via le menu Paramètres)
<b>Alimentation</b>	Six (6) piles alcalines AA (incluses) OU un adaptateur enfichable mural pour appareil médical en option 9V CA / CC (numéro de pièce Detecto PD-CA).
<b>Écran</b>	LCD à cinq chiffres, sept segments et 1.0 pouces (25 mm) de hauteur
<b>Température de fonctionnement</b>	50 à 104 °F / +10 à +40 °C
<b>Touches de fonction</b>	ON / OFF, IMPRIMER, ENTREE, FLÈCHE VERS LE HAUT, FLÈCHE VERS LE BAS, HAUTEUR IMC, CAPTURE / DÉGAGEMENT, ZÉRO
<b>Avertisseurs</b>	ZÉRO, CAPTURE, STA, MAINTIEN, LB, KG, CM, FT / IN, HAUTEUR, POIDS, IMC, AM, PM
<b>Dimensions de la balance</b>	L 14.3 po x P 19.5 po x H 52.0 po / L 36.3 cm x P 49.5 cm x H 132.1 cm
<b>Interface</b>	Port série RS-232, 9 broches (DB-9), débit en bauds 9600
<b>Toise</b>	téléscopique standard inclus
<b>Unités de la toise</b>	Pouces ou Centimètres
<b>Portée de la toise</b>	30 po à 8.5 po / 76 cm à 214.5 cm
<b>Saisie manuelle de la hauteur</b>	2 pi 0.0 po - 7 pi 10.5 po par 0,5 po / 60.0 cm - 240.0 cm par 1 cm
<b>Pesée minimale</b>	11 lb / 5 kg
<b>Roulettes</b>	(2) roulettes pour faciliter le déplacement
<b>Arrêt automatique sélectionnable</b>	Jusqu'à 9 minutes
<b>Construction</b>	Colonne et toise - alliage d'aluminium revêtu de poudre blanche ; boîtier de l'indicateur, bras de la toise, plateau et base - ABS blanc ; PVC noir mat
<b>Poids du produit</b>	17.7 lb / 7.7 kg
<b>Poids d'expédition</b>	25 lb / 11.3 kg
<b>Dimensions de l'emballage</b>	30 po L x 20 po P x 11 po H / 76 cm L x 51 cm P x 28 cm H
<b>Code UPC</b>	809161197709

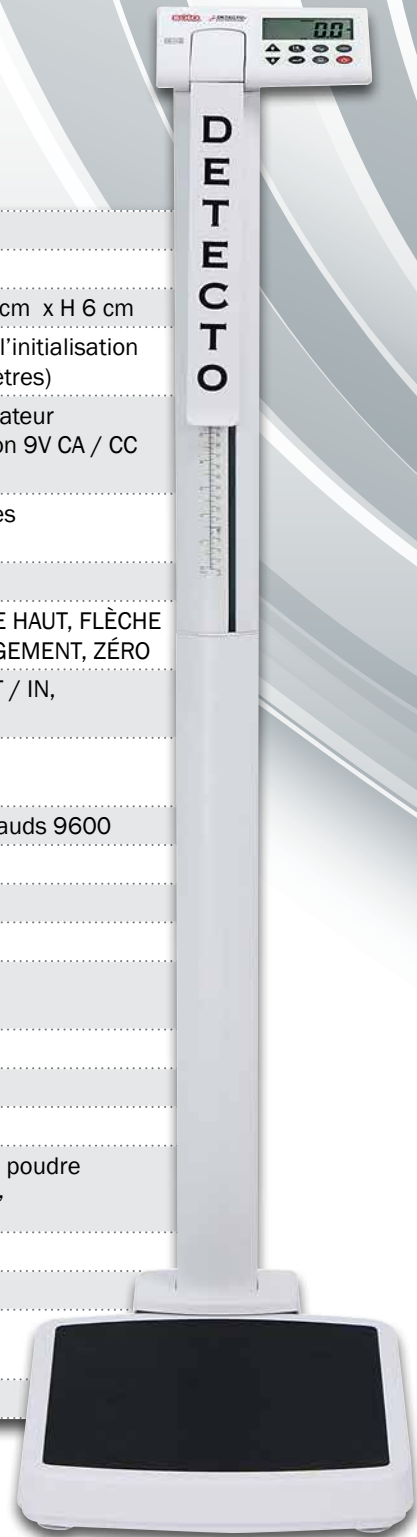

*Detecto Scale se réserve le droit d'améliorer, de renforcer ou de modifier les caractéristiques et spécifications sans préavis.*



203 E. Daugherty, Webb City, MO 64870 USA  
Ph: 417-673-4631 or 1-800-641-2008 Fax: 417-673-2153

**Mobile : m.detecto.com**

**VENDU PAR :**